

CardioRisco


Evolução do Protótipo de Baixa para Alta Fidelidade, Decisões de UI/UX, Fluxos de Navegação e Conformidade com Requisitos.

01 Ideia Inicial | **02** Evolução | **03** Alta Fidelidade | **04** Fluxo Principal | **05** Decisões UI/UX | **06** Requisitos & Personas

Integrantes


Erick Gabriel Lima Matos • José Victor Barbosa Neves • João Afonso Lopes de Carvalho • João Gabriel da Costa Souza

01. A Ideia Inicial — Protótipo de Baixa Fidelidade

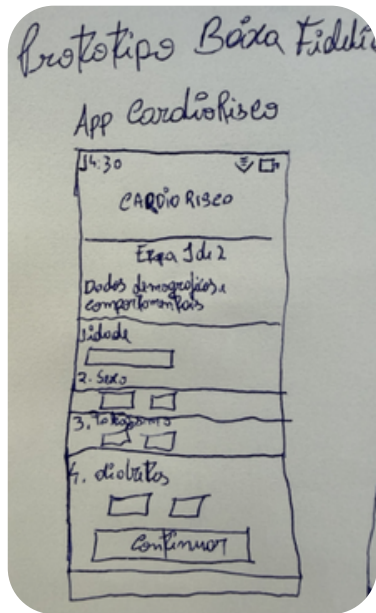


Tela 1

Dados Demográficos

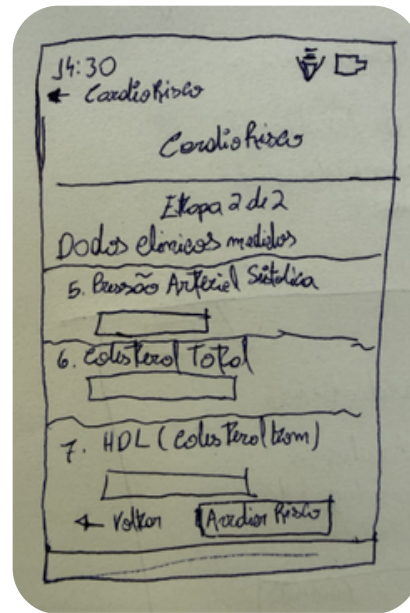


Tela 2

Dados Clínicos

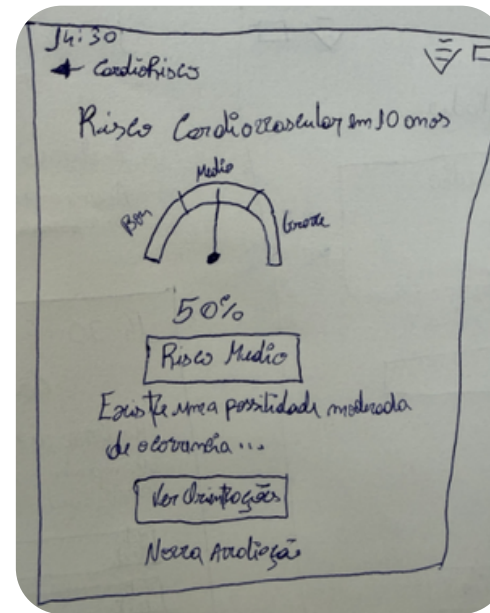


Tela 3

Resultado & Velocímetro

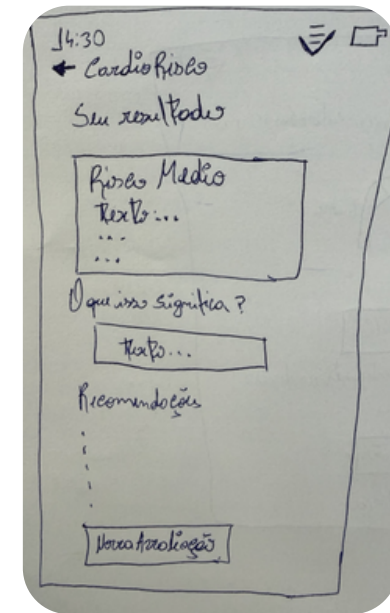

Tela 4

Recomendações

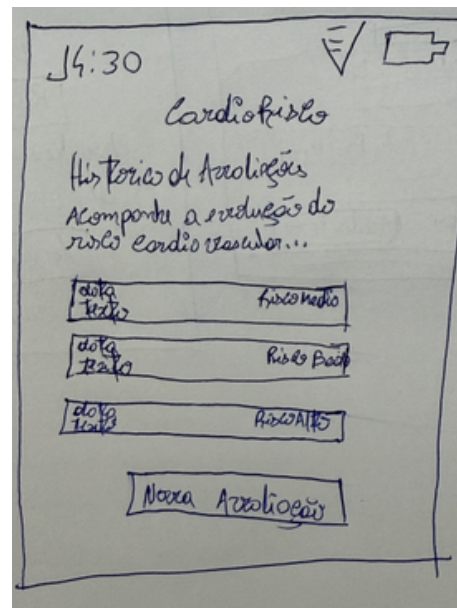

Tela 5

Histórico Secundário

02. O Que Foi Alterado Durante a Evolução

REFINAMENTO DE UX/UI

1. Fundo Escuro para Alto Contraste Solar

Evoluiu de rascunhos de papel em fundo claro para uma interface Dark Mode. Essa alteração garante visibilidade perfeita em ambientes externos sob incidência direta de luz solar durante as visitas domiciliares.

2. Divisão do Formulário em 2 Etapas Estruturadas

Mantida e refinada a separação entre *Dados Demográficos/Comportamentais* e *Dados Clínicos Medidos*. Reduz a carga cognitiva do ACS e impede poluição visual na tela do smartphone.

3. Inclusão do Indicador de Progresso

Adicionado componente visual "Etapa 1 de 2" e "Etapa 2 de 2" no topo das telas de entrada para dar previsibilidade ao tempo do atendimento.

4. Refinamento Gráfico do Velocímetro

O velocímetro desenhado à mão ganhou arco colorido tricolor (Verde / Amarelo / Vermelho) com ponteiro centralizado, facilitando a explicação pedagógica ao paciente leigo.

5. Indicadores de Estado Offline e LGPD

Inclusão de avisos explícitos na interface informando o status de conexão ("Dados salvos no dispositivo") e garantia de privacidade ("Registros sem Nome ou CPF").

6. Aumento da Área de Toque dos Botões

Transformação dos botões simples em áreas clicáveis amplas de cor verde vibrante (#10b981) para facilitar a digitação com uma só mão durante a caminhada em campo.

03. A Solução Final – Protótipo de Alta Fidelidade

9:41

CardioRisco
AVALIAÇÃO CARDIOVASCULAR

Feminino
Não
Não

Etapa 1 de 2

Dados demográficos e comportamentais
Responda as perguntas abaixo.

1. Idade
56 anos

2. Sexo
Masculino Feminino

3. Tabagismo
Sim Não

4. Diabetes
Sim Não

CONTINUAR →

• Offline — dados salvos no dispositivo

Tela 1: Demográficos

Coleta de Idade, Sexo, Fumo e Diabetes

9:41

CardioRisco
AVALIAÇÃO CARDIOVASCULAR

Voltar

Risco Cardiovascular em 10 anos

RISCO INTERMEDIÁRIO

Existe uma possibilidade moderada de ocorrência de um evento cardiovascular nos próximos 10 anos.

VER ORIENTAÇÕES

NOVA AVALIAÇÃO

• Offline — dados salvos no dispositivo

Tela 2: Clínicos

Coleta de PA, Colesterol e HDL

9:41

CardioRisco
AVALIAÇÃO CARDIOVASCULAR

SEU RESULTADO

RISCO INTERMEDIÁRIO
Existe uma possibilidade moderada de ocorrência de um evento cardiovascular nos próximos 10 anos.

O que isso significa?
Seu risco não é baixo, mas pode ser reduzido com mudanças no estilo de vida e acompanhamento adequado.

Recomendações

- Pratique atividade física regularmente
- Mantenha uma alimentação saudável
- Não fume
- Monitore sua pressão arterial e colesterol
- Procure a unidade de saúde para avaliação e acompanhamento

NOVA AVALIAÇÃO

• Offline — dados salvos no dispositivo

Tela 3: Resultado

Velocímetro e Classificação

9:41

CardioRisco
AVALIAÇÃO CARDIOVASCULAR

Recomendações:

Etapa 2 de 2

Dados clínicos medidos
Informe os valores medidos durante a avaliação.

5. Pressão Arterial Sistólica
140 mmHg

6. Colesterol Total
210 mg/dL

7. HDL (Colesterol bom)
45 mg/dL

Certifique-se de utilizar os valores mais recentes dos exames do paciente.


VOLTAR AVALIAR RISCO

• Offline — dados salvos no dispositivo

Tela 4: Orientações

Recomendações de Saúde

04. O Fluxo Principal do Aplicativo

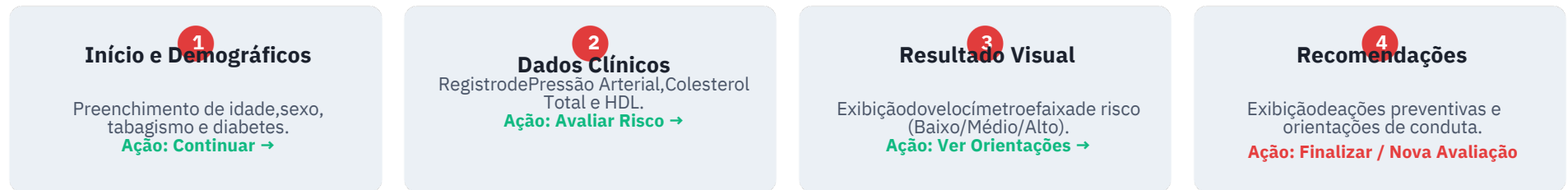

Simplicidade Operacional

O fluxo foi estruturado para exigir o mínimo de cliques possíveis. A navegação linear sem menus complexos impede que o ACS se perca durante a visita domiciliar e permite realizar o atendimento completo em menos de 2 minutos.

05. As Principais Decisões de UI/UX

Cores & Contraste

- **Fundo Escuro (#121212):** Evita reflexos sob sol for te.
- **Verde (#10b981):** Confirmação e ações primárias.
- **Amarelo/Laranja:** Risco intermediário.
- **Vermelho (#ef4444):** Alerta de alto risco cardiovascular.

Tipografia & Leitura

- **Fonte Sem Serifa:** Alta legibilidade em telas pequenas de celulares básicos.
- **Hierarquia Clara:** Títulos, rótulos e valores numéricos em destaque com pesos contrastantes.

Acessibilidade & Usabilidade

- **Informação Multimodal:** A faixa de risco combina cor, percentual, texto e velocímetro.
- **Botões de Seleção (Toggle):** Minimizam digitação.
- **Área de Toque Ampla:** Previne erros durante uso em movimento.

06. Atendimento aos Requisitos e Personas

Elemento do Projeto	Como o Protótipo Atende	Status
Persona ACS (Mariana)	Formulário rápido em 2 etapas, botões grandes e suporte completo a funcionamento online sem atrasar visitas.	Atendido
Persona Paciente	Velocímetro visual com arco de cores e linguagem simples nas orientações, servindo como apoio pedagógico.	Atendido
RF01 a RF05 (Coleta/Validação)	Campos numéricos com unidades (mmHg, mg/dL) e mensagens de erro explícitas em texto.	Atendido
RF06 a RF10 (Cálculo/Exibição)	Exibição de percentual, classificação em faixas e orientações diretas de conduta.	Atendido
RNF01 a RNF04 (Usabilidade)	Formulário enxuto (≤ 7 perguntas), fluxo composto por 4 telas e alto contraste.	Atendido
RNF05 / LGPD (Privacidade)	Interface explícita que registros não armazenam Nome ou CPF do paciente.	Atendido